

# Selbstfilter-Maske FFP2 NR

Persönliche Schutzausrüstung

Hergestellt gemäß der Norm EN 149: 2001 + A1: 2009

Hergestellt in Spanien

CE 0161

# UR+k2

## PRODUKTINFORMATION:

Die Selbstfilter-Einwegmaske UR+K2 FFP2 NR schützt vor Partikeln und Aerosolen (Feststoffe und Flüssigkeiten), sobald die Sauerstoffkonzentration 19,5 Volumenprozent überschreitet. Mit einer Mindestfiltrationsrate von 95 % wird sie als Typ III entsprechend der Bakterienfiltration persönlicher Schutzausrüstungen (PSA) eingestuft.

Sie wird mit verstellbaren Ohrenbändern und breiterem Nasenbügel für besseren Komfort und erhöhter Atmungsaktivität geliefert.

Sonstige Angaben:

- Nicht wiederverwendbare FFP2-Maske (NR)
- Einheitsgröße
- Hergestellt in Spanien
- Hydrophil
- Verwendungszeit 8 Stunden
- Ergonomischer Nasenbügel
- Elektrostatischer Filter zur Erleichterung der Atmung
- Anatomisch angepasst, um das Eindringen von Partikeln wirksam zu blockieren
- Anpassbare Ohrbandlänge mit Bindsystem für besseren Sitz
- Verpackung: Recyclbare Pappkartons mit 10, 20 und 50 Stück und individuell verpackten Masken im Karton



Unter bestimmten Lagerbedingungen 2 Jahre lagerbar.

## TECHNISCHE

*Persönliche Schutzausrüstung vom Typ selbstfilternde Maske, bestehend aus 4 Materialschichten und einem breiten Nasenbügel für mehr Komfort. Die äußere und innere Schicht sind hydrophil, so dass sie feuchtigkeitsabweisend sind.*


*Farbe: blau. Stückgewicht 7,7 g (+/- 5%). Sie besteht aus 4 Lagen Vliesstoff.*

*Die Maske wird einzeln in einer individuellen Kunststoffverpackung in Kartons zu 10, 20 oder 50 Stück geliefert. Jede Verpackung enthält Informationen über das Chargen- und Verfallsdatum des Produkts sowie die Verpackungsbedingungen.*

*In Übereinstimmung mit der Norm EN 149:2001+A1:2009 ist die Rückverfolgbarkeit der Materialien während des gesamten Herstellungsprozesses sowie die Endqualität des Produkts und seine Filtereigenschaften gemäß seiner Zulassung gewährleistet.*

*Von Wärmequellen fernhalten. In einem gut belüfteten Innenraum bei einer Luftfeuchtigkeit unter 80% und frei von korrosiven Gasen lagern.*


## AUF-UND ABSETZEN DER MASKEN

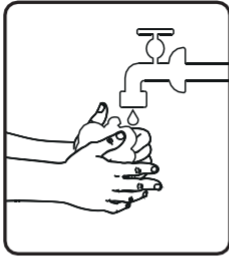

Vor dem Berühren und Aufsetzen die Hände 40-60 Sekunden waschen.



Ausschließlich die Bänder anfassen.

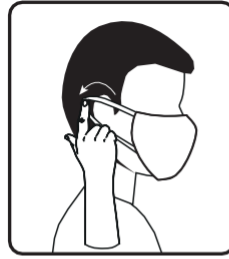


Die elastischen Bänder hinter die Ohren legen.




Über Mund und Nase platzieren. Achten Sie darauf, dass die Maske dicht an Ihrem Gesicht




Drücken Sie den Nasenclip an, damit

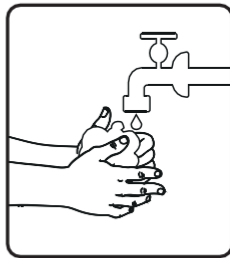

Waschen Sie sich die Hände, bevor Sie die Maske abnehmen.

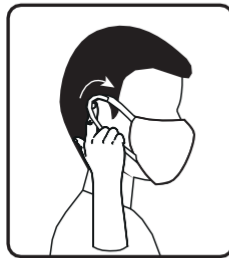

Beim Abnehmen ausschließlich die

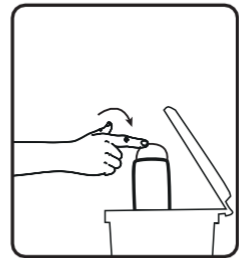

Zum Entsorgen legen Sie sie in einen Plastikbeutel und werfen Sie diesen verschlossen in den Müll.

### MUNDSCHUTZ ANPASSEN



Hängen Sie die Verstellbänder der Maske wie in der Zeichnung ein.



### ○ Kontaktinformation:

Vertrieb und Kundendienst in Spanien:  
Tel: +34 94 662 04 48  
E-Mail: [urmask@urmask.eu](mailto:urmask@urmask.eu)

### ○ Herstellerinformationen:

- **Urbegi Servicios Auxiliares, SLU**  
St.-Nr. B95221891  
Industriegebiet El Páramo, Halle B7  
48800 Balmaseda (Bizkaia)
- **Equipos de Protección Mirandeses, SL**  
St.-Nr. B01951920  
Industriegebiet Bayas  
Calle los Corrales, Parzelle 33/35  
09200 Miranda de Ebro (Burgos)

Produktinformation in: [www.urmask.eu/ffp2](http://www.urmask.eu/ffp2)