

Mascherina autofiltrante FFP2 NR

Dispositivo di protezione individuale

Prodotto conforme alla norma EN 149:2001+ A1:2009

Prodotto in Spagna

CE 0161

UR+k2

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO:

La mascherina UR+k2 monouso autofiltrante FFP2 NR protegge da particelle e aerosol (solidi e liquidi) purché il tasso di ossigeno sia superiore al 19,5% del volume. Con una capacità filtrante minima del 95%, è classificata nella Categoria III dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per filtraggio batterico.

È venduta con fermaglio regolabile per fissaggio alle orecchie e ponte nasale più largo per aumentare il comfort e la respirabilità.

Altri dati:

- Mascherina FFP2 Non Riutilizzabile (NR)
- Taglia unica
- Made in Spain
- Idrofila
- Tempo d'impiego: 8 ore
- Ponte nasale ergonomico
- Filtro elettrostatico per agevolare la respirazione
- Adattata anatomicamente per bloccare efficacemente le particelle
- Lunghezza regolabile con fermaglio per migliorare l'aderenza al viso
- Confezionata singolarmente in sacchetto sigillato e distribuita in scatole di cartone riciclabile da 10, 20 e 50 unità



Validità: 2 anni nelle condizioni di stoccaggio specificate.

INFORMAZIONI

Dispositivo di protezione individuale tipo mascherina autofiltrante composta da 4 strati di materiale e con ponte nasale largo per un maggior comfort. Lo strato esterno e quello interno sono idrofili e quindi sono a prova di umidità.


Ogni unità, di colore blu, pesa 7,7 g (+/- 5%) ed è formata da 4 strati di tessuto non tessuto.

La mascherina è confezionata singolarmente in un sacchetto sigillato in plastica e si vende in scatole di cartone da 10, 20 o 50 unità. In ogni confezione sono riportate le informazioni sul lotto e la data di scadenza del prodotto, nonché le condizioni dell'imballaggio.

Ai sensi della norma EN 149:2001+A1:2009 sono garantite la tracciabilità dei materiali in tutto il processo di produzione, la qualità finale del prodotto e le caratteristiche filtranti conformemente all'omologazione.

Mantenere lontano da fonti di calore. Conservare al coperto in un sito ben ventilato, con umidità inferiore all'80% e privo di gas corrosivi.

CONSIGLI PER INDOSSARE E RIMUOVERE LA MASCHERINA

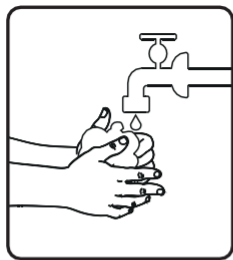

Prima di usare la mascherina, lavarsi le mani per 40-60 secondi.



Toccare solo gli elastici della mascherina.




Far passare gli elastici dietro le orecchie.



Sistemare la mascherina in modo tale da farla aderire bene al viso.




Stringere la pinza nasale per fare aderire bene la

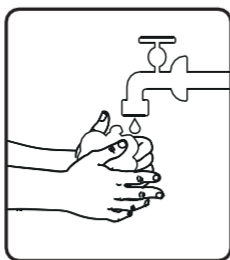

Lavarsi le mani prima di togliersi la mascherina.



Rimuovere la mascherina

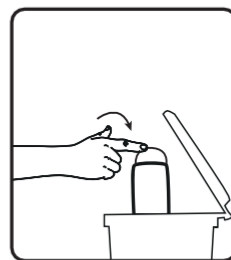

Dopo l'uso, racchiuderla in un sacchetto di plastica e depositarla nell'apposito contenitore.

REGOLAZIONE DELLA MASCHERINA



Inserire gli elastici della mascherina come indicato nella figura.



Dati di contatto:

Vendite e assistenza al cliente in Spagna:

Tel.: 94 662 04 48

Email: urmask@urmask.eu

Dati del produttore:

○ Urbegi Servicios Auxiliares, SLU

CIF B95221891

Polígono Industrial El Páramo, Pabellón B7
48800 Balmaseda (Bizkaia)

○ Equipos de Protección Mirandeses, SL

CIF B01951920

Polígono Industrial Bayas
Calle Los corrales, parcelas 33/35
09200 Miranda de Ebro (Burgos)

Informazioni sul prodotto su: www.urmask.eu/ffp2